


## VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE

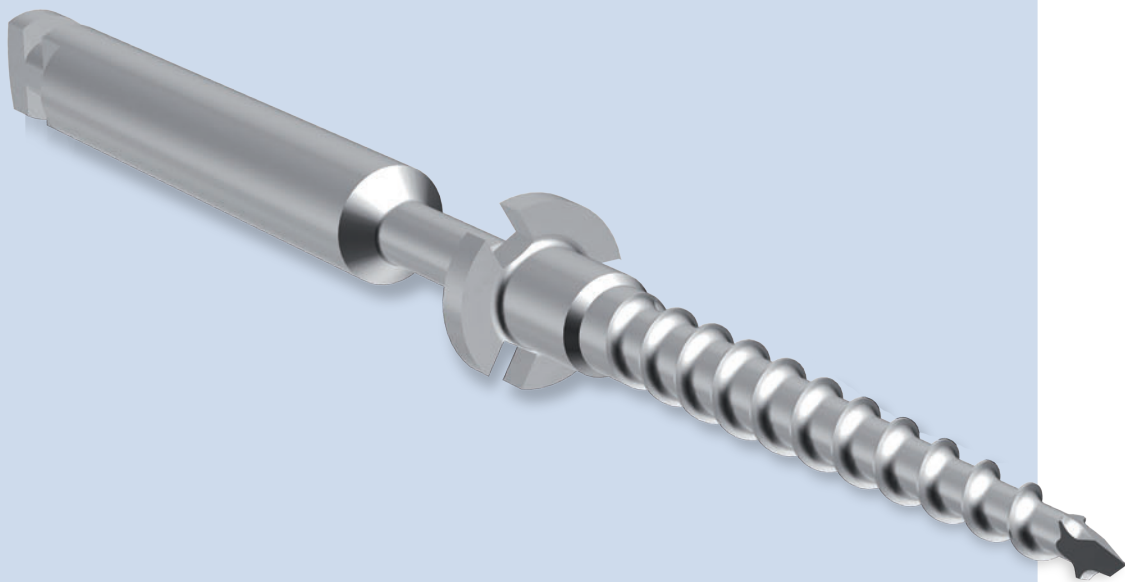

*Spécialement conçue pour  
la chirurgie dentaire...*


L'obtention de résultats esthétiques en chirurgie implantaire nécessite souvent un remodelage osseux réussi. La vis d'ostéosynthèse anthogyr a été spécialement conçue pour la pose de greffons osseux aussi bien sur le maxillaire qu'à la mandibule. Ses caractéristiques originales en font un outil de travail indispensable et facile d'utilisation pour tout chirurgien dentiste aguerri en greffe d'apposition ou désireux de maîtriser cette technique.

anthogyr


A global solution for dental implantology

## LES PRINCIPAUX ATOUTS


- **Accessibilité** : La vis est constituée d'un seul bloc avec son mandrin préhenseur (fig. 1). Montée directement sur contre-angle, elle permet d'accéder aux secteurs difficiles comme la branche mandibulaire postérieure ou le versant palatin des crêtes osseuses.
- **Excellente tenue de vis** : Le mandrin préhenseur est auto-sécable. Le risque de chute de vis pendant le transport en bouche due à une mauvaise manipulation ou à l'usure des instruments préhenseur est totalement écarté.
- **Flexibilité** : Le vissage peut-être intégralement réalisé au contre-angle ou peut être terminé manuellement à l'aide du tournevis. Une clé contre-couple permet de provoquer la rupture du mandrin par anticipation.
- **Respect des tissus mous** : La gorge de rupture située sur la tête de vis a été conçue pour garantir une cassure propre qui ne blesse pas les tissus mous (fig. 3).
- **Parfaite stabilisation du greffon** : La tête de vis est suffisamment large pour garantir un parfait placage et une parfaite immobilisation du greffon (fig 2).
- **Prêtes-à-l'emploi** : Les vis sont livrées stériles par lot de deux. Les vis sont à usage unique. La vis non utilisée peut être re-stérilisée après ouverture de l'emballage.

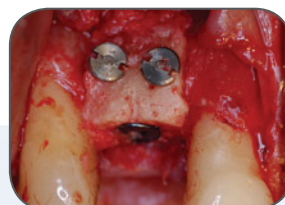


1. Vis montée sur mandrin auto sécable

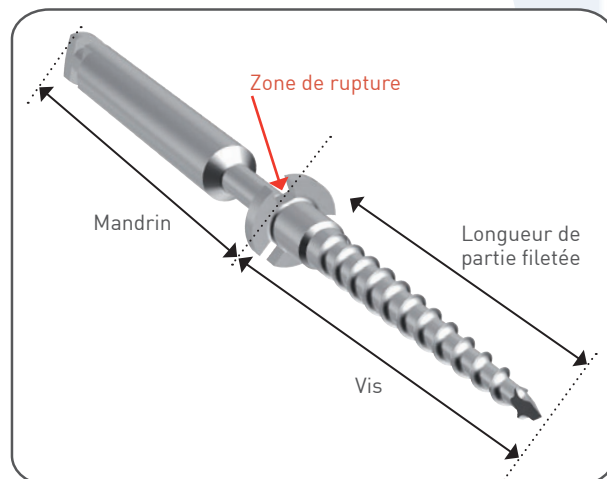

2. Tête de vis

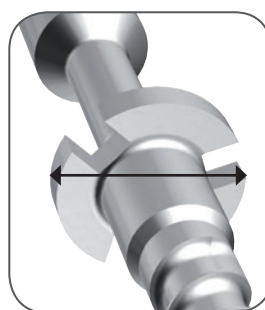

3. Gorge de rupture

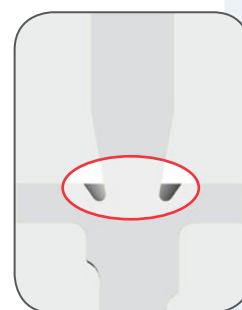

Les vis de greffon sont livrées par 2 dans un double emballage stérile. Les vis sont proposées en longueurs 8, 10, 12 et 14 mm.



Réf. IA CO GREF 08 : vis 8 mm

Réf. IA CO GREF 10 : vis 10 mm

Réf. IA CO GREF 12 : vis 12 mm

Réf. IA CO GREF 14 : vis 14 mm



Réf. IN FH15100 : foret Ø 1,5 mm



Réf. INGF002 : mandrins court de vissage pour contre-angle



Réf. INGF001 : mandrins long de vissage pour contre-angle



Réf. INGF003 : clé de vissage adaptable sur clé à cliquet



Réf. OI 3215 : clé à cliquet



Réf. INGF004 : tournevis



Réf. INGF005 : clé contre-couple